

# 六罐（30ml）高能离心式真空行星磨/混料机 MSK-PCV-30




MSK-PCV-30 是一款高能离心式行星混料/球磨机（最大离心加速度 438g），可在真空环境下同时处理 6 种不同的材料，每个工位罐体的最大容积是 30ml

## 技术参数

产品特点	6 个工位，可同时处理 6 种不同样品 可在真空环境下对样品进行混合或球磨 设备尺寸小巧（300mmL×360mmW×480mmH），便于在实验室使用 可程序化设置转动程序，最高公转速度可达 2000rpm <b>离心加速度可达 438g</b> 对于所混合样品，污染小（没有任何金属搅拌桨） 可处理样品： 纳米粉，陶瓷粉末，油脂，浆料，糊状物，机械合金化（采用特制合金罐）
输入电压	AC208-240V，单相，50/60Hz 电机功率：400W

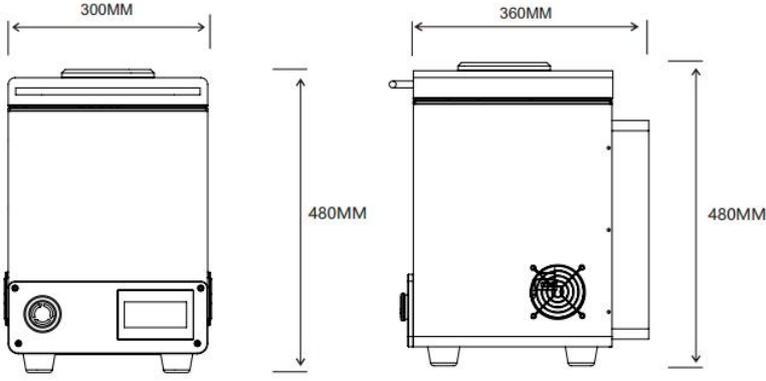

<p>安全和保护</p>	<p>当出现以下情况，设备不能运行，会自锁          每个工位上样品重量超重          样品重量不平衡          设备上盖打开</p>
<p>设备尺寸</p>	 <p>The technical drawing shows two views of a rectangular device. The front view on the left indicates a width of 300MM and a height of 480MM. The side view on the right indicates a depth of 360MM and a height of 480MM. The device has a control panel on the front with a circular indicator and a rectangular display. A fan grille is visible on the side view.</p>
<p>设备重量</p>	<p>70kg</p>