
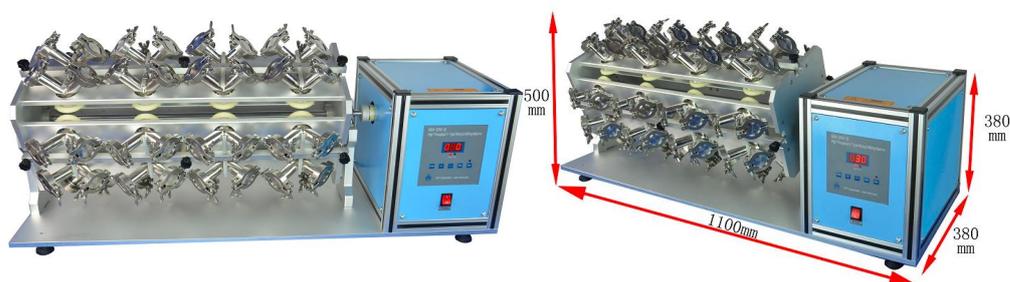




高通量 V 型混料机（32 个不锈钢罐 （50ml），可在 Ar 环境下使用） MSK-SFM-32

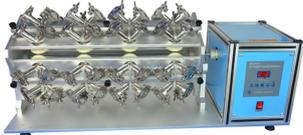

MSK-SFM-32 是一款高通量混料和球磨机，可安装 32 个容积为 50ml 的不锈钢罐，可同时对 32 组样品进行处理。罐体采用独特的 V 型设计，用于细化和混合干粉。一个数字控制面板设置转动速度和时间。混料机也可在 Ar 环境下的手套箱内使用，用于处理一些空气敏感性材料。

技术参数

<p>产品特点</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 32 个 V 型混料罐，材质为 304 不锈钢• 不锈钢罐两端可以打开，便于进料，卸料和清洗• 可在 Ar 环境下的手套箱内使用，处理空气敏感性材料
<p>电源要求</p>	<ul style="list-style-type: none">• AC 110 - 240V, 50/60Hz 单相• 最大电流：5A

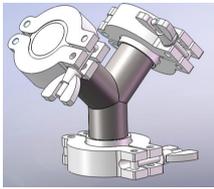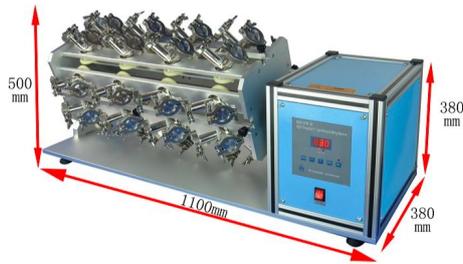	<ul style="list-style-type: none"> • 功率： 90 W
运行时间设置范围	1~900 分钟
旋转速度	20~70rpm
混料罐容积	<p>混料罐容积 50ml,一般处理样品最大 20g (金属粉末) 其他混料罐尺寸可根据客户要求定制</p> 
可选研磨球	<p>可在本公司选购各种材质和尺寸的研磨球</p> 
外形尺寸	
重量	50kg
质保期	一年质保期，终生维护
可选	<p>低温球磨/混料，自动流动液氮控制器</p>  <p>32 Tanks (50 ml) High Throughput Mixer</p> <p>Liquid Nitrogen (Not Included)</p> <p>Temperature Control</p>