

经济型小型干燥室（6 平米，最高露点 -40℃）MSK-ADR-C6




MSK-ADR-C6 是一款低价格小型干房，面积为 6 平米，露点 $< -40^{\circ}\text{C}$ （一个人穿防护服进入）。这个小型干房的使用面积相当于一个标准 6 连体手套箱，但是价格相当于一个标准 3 连体手套箱。用户可放入一整套扣电设备或小型软包电池设备。

技术参数

<p>产品特点</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 一套小型干房系统，组成部分为一个除湿机，一个循环水冷机和一个温室棚（经过密封处理） • 干房简洁仪安装（用户可安装） • 露点: -40°C ($\sim 79\text{PPM}$)（干房内无脱气和排蒸汽设备，在干房中央测试） • 总功率较小，8KW • 干房可放置在一个空调房内，温度$<26^{\circ}\text{C}$，湿度$<60\%$
<p>干房</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 小型干房采用移动式温室棚制作 • 尺寸: L3180mm x 1900mm* x 1930mm • 进气口（直径 8 英寸）和出气口(直径 6 英寸)
<p>除湿机</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 空气流量: 800 cmh • 干燥后气体流量: 500 cmh • 露点: $<- 60^{\circ}\text{C}$（空房间），$<- 40^{\circ}\text{C}$（一个人在干房里，20 分钟内） • 功率: 5 KW • 尺寸: L700mm x W1500mm X H1900mm • 质量: 520Kg
<p>循环水冷机</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 配有一台循环水冷机 • 制冷量: 7826Kcal/h (9.1kw) • 水流速: 60 L/min • 水箱容积: 50L • 温度范围: $5 - 35^{\circ}\text{C}$（可设置） • 水管: $\Phi 25.4\text{mm}$ • 尺寸: L900 mm x W600 mm x H1250 mm • 质量: $\sim 200\text{Kg}$ • 功率: 2.2KW
<p>电源需求</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AC 380V 50 / 60Hz, 三相 • 总功率: 8KW
<p>噪音</p>	<ul style="list-style-type: none"> • $< 55 \text{ dB}$

尺寸

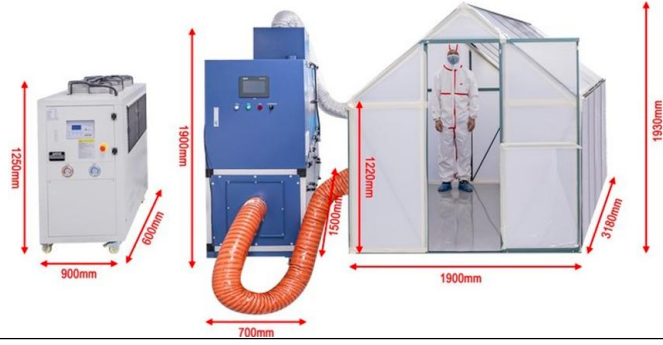

重量

800Kg

质保

一年质保期，终身维护

注意和警告



- 必须穿防护服进入干房，如左图所示
- 进入干房前需保持衣服干燥
- 人进入干房后需要 20-30 分钟干房恢复干燥值：-40℃